

SOLID PLUS HEAT

WWW.ROTAID.COM 



**PHYSIO
CONTROL**

 **ROTAID™**
AED CABINETS

ROTAID SOLID PLUS HEAT

FICHE PRODUIT

La Rotaïd Solid Plus Heat est une armoire murale DAE (défibrillateur automatisé externe) hautement robuste et résistante garantissant un stockage, solide et durable de votre appareil DAE. Son design et sa forme ronde caractéristiques la rendent facile à trouver une simple rotation du couvercle vous permet d'avoir libre accès au DAE. Le couvercle est pourvu de logos DAE et de flèches de direction afin de ne laisser place à aucune ambiguïté.

Il est possible d'ouvrir l'armoire grâce un mouvement rotatif intuitif retirant l'ensemble du couvercle. Le secouriste a libre accès au DAE suspendu via des pattes de fixation ajustables pour une prise en main rapide et simple. Le couvercle est attaché à la plaque signalétique via une lanière et ne nécessite aucune attention supplémentaire après l'ouverture. Un crochet en acier inoxydable, attaché à l'arrière de l'armoire, peut soutenir un joint, une balise ou un autre dispositif.

Le couvercle, pourvu de flèches de direction et d'encoches pour une prise en main optimale, est constitué de Polycarbonate à 100 %. Avec une épaisseur de 5 millimètres, il offre une protection solide et garantit un niveau élevé de résistance à l'eau et à la poussière. En outre, le couvercle est muni de filtres UV, afin d'être protégé des rayons directs et indirects du soleil. La décomposition, la rouille ainsi que l'accumulation de résidus sont exclues.



Un dispositif de chauffage puissant et efficace maintient une température intérieure à au moins 5 degrés centigrades même lorsque la température descend à - 25 degrés Celsius. Les voyants lumineux permettent à l'armoire d'être repérée dans l'obscurité. Tout le système fonctionne entièrement de façon automatique et est accompagné d'une installation « plug-and-play ».

Tous les matériaux sont testés en extérieur et fournissent une protection longue durée du DAE et de l'armoire. L'armoire est protégée par un système d'alarme sonore.

**TRÈS BASSE
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE**

**FONCTIONNE À DES
TEMPÉRATURES
ALLANT JUSQU'À**

-25°C


**FONCTIONNEMENT
ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE**

VOYANT LUMINEUX



ROTAID SOLID PLUS HEAT

DÉTAILS TECHNIQUES

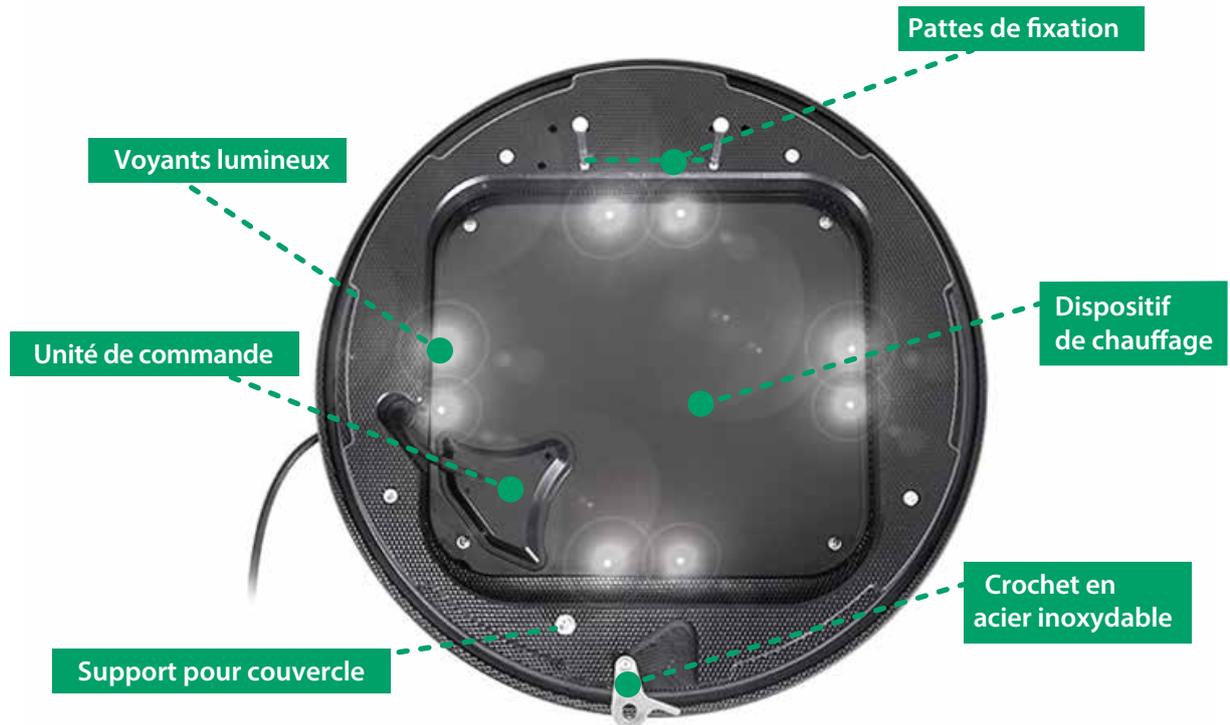

La Plus peut accueillir tous les DAE Physio-Control, incluant les "DAE et les défibrillateurs LIFEPAK® et HeartSine®.

Disponible en 4 couleurs (vert, rouge, blanc, jaune)



Abmessungen

Longueur **48 cm** Largeur **48 cm** Profondeur **18 cm** Poids **6,7 kg**

Longueur **18,9"** Largeur **18,9"** Profondeur **7,1"** Poids **14,7 livres**

Emballée dans une boîte individuelle, matériaux de fixation inclus.

ROTAID SOLID PLUS HEAT

FICHE DE SPÉCIFICATIONS

USAGE: pour un usage extérieur.

DIMENSIONS

Longueur **48 cm / 18,90"** Largeur **48 cm / 18,90"**
Profondeur **18 cm / 7,1"** Poids **6,7 kg / 14,77 livres**

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

PE-HD (polyéthylène haute densité) 100 % recyclé, 3 plaques individuelles, finition en forme de frange.

Un joint en caoutchouc garantit une protection contre la poussière et l'eau.

Des trous de fixation pré-forés sont situés sur le haut de la plaque signalétique afin d'accueillir 2 boulons DIN 912 8,8 EV M6x80 (inclus) pour un placement optimal du défibrillateur. 912 8.8 EV M 6 x 80).

Crochet en acier solide à l'arrière pour installer un joint de protection, des instructions ou autres accessoires.

4 positions de montage encastrées pour une fixation ferme. 4 vis DIN 7981 A2 5,5 x 60 mm et 4 bagues DIN 9021 A2 M6x18x1,6 mm sont incluses pour l'installation sur tous les murs.

COUVERCLE

Polycarbonate 100 % recyclé, 5 mm d'épaisseur, entièrement transparent, muni de filtres UV pour une transparence longue durée et un blocage des rayons UV.

Une lanière en nylon est attachée au couvercle et reliée à la plaque signalétique. La ceinture en nylon mesure 15,75 pouces de long et 2 pouces d'épaisseur et est munie de bagues en laiton.

4 flèches de direction fournissent une aide à l'ouverture de l'appareil.

6 encoches permettent la prise en main pour une ouverture rapide et solide.

Couleurs disponibles : vert, jaune, rouge, blanc

SYSTÈME D'ALARME

Le système sonore 90 dB déclenché par un aimant à basse puissance de la taille d'une pièce de monnaie dans le couvercle, dispose d'un boîtier ABS et est pré-installé puis fixé sur la plaque signalétique.

L'alarme fonctionne avec 2 piles AAA.

Un bouton de réinitialisation est situé en haut de l'alarme afin d'interrompre le système d'alarme si nécessaire.

EMBALLAGE

Boîte blanche, FEFCO 0201, répondant aux exigences FSC.

Dimensions de la boîte : 50 x 50 x 25 centimètres / 19,7 x 19,7 x 9,8 pouces.

Une armoire par boîte.

ROTAID SOLID PLUS HEAT

CHAUFFAGE PTC D'AMOIRE DAE


Le chauffage d'armoire du DAE ROTAID - PTC est un chauffage auto-limitateur avec un contrôleur incorporé basé sur 24 V utilisant un transformateur 230 / 110 Volts pour une utilisation sûre et un branchement simple.

Ce chauffage se base sur une technologie de chauffage solide avec un savoir-faire démontré depuis des années dans les applications automobiles.

Le circuit de chauffage ne s'appuie pas sur un seul circuit continu. Le chauffage consiste en plusieurs centaines d'éléments chauffants à pâte thermique PTC parallèles garantissant une performance longue durée même si les circuits sont localement endommagés pour quelque raison.



CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE POSITIVE

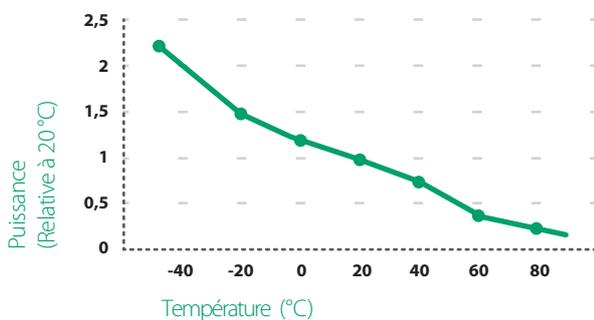

Le PTC (contrôle de température positive) se réfère à la caractéristique de la pâte thermique PTC unique utilisée afin de générer de la chaleur dans le chauffage d'armoire du DAE ROTAID – PTC. La résistance dans la pâte thermique génératrice de chaleur augmentera avec la température de façon à ce qu'elle limite la puissance efficacement en dessous de 30 °C. Cela signifie que le chauffage donnera plus de puissance si nécessaire en cas de basses températures et moins de puissance en cas d'augmentation de la température.

Cette caractéristique de la pâte thermique PTC ajoute une sécurité supplémentaire au produit, éliminant ainsi le risque de surchauffe. Elle requiert encore un contrôleur de température afin de fournir la chaleur et la température nécessaires dans l'armoire du DAE.

La nature des éléments chauffants PTC fourniront au chauffage des caractéristiques légèrement différentes par rapport à un chauffage conventionnel à consommation électrique fixe. La puissance d'allumage sera plus élevée mais diminuera assez rapidement à un certain point sur la courbe représentant la puissance. La valeur finale dépend de la température à la surface ainsi que de la température mesurée dans l'unité de contrôle directement placée sur le coin arrière gauche de l'élément chauffant. Ce contrôleur régule l'alimentation électrique en s'allumant et s'éteignant selon sa mesure. Le chauffage est équipé d'une face arrière adhésive pour une installation simple dans l'armoire du DAE. D'autres trous sont placés pour une fixation supplémentaire de l'élément chauffant à la face arrière de l'armoire du DAE.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temp. max. de l'élément °C, (°F)	70 (158)
Temp. min. de l'élément °C, (°F)	-50 (-58)
Tolérance à la résistance	± 20 %
Tension évaluée	230
Consommation électrique surface	65 @ 20 °C
Approbations / normes	NEMKO-CE (IEC 60335-1)
Autre	Substrats éventuels :
	PET Face
arrière auto-adhésive	Oui
Fil de connexion	3 mètres
Contrôleur de thermostat	Oui

FONCTION DU CONTRÔLEUR DE THERMOSTAT

>10 C°	alimentation éteinte
10-7 C°	Max 50 % au moment de l'augmentation de la puissance 5 % toutes les 10 secondes
7-2 C°	Max 100 % au moment de l'augmentation de la puissance 5 % toutes les 10 secondes
< 2 C°	100 % alimentation allumée.

TRANSFORMATEUR 24VDC



Alimentation électrique	CD 24 V - 5 000 mA
Entrée	CA 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz
Longueur du câble	1,2 mtr.
Sortie	CD 24 V ± 5 %
Courant max. de sortie	5 000 mA – 120 W.
Connexion	CD -connecteur direct
Longueur du câble	1,8 mtr.



VOYANT

8 LED - 2 Watt
 Chauffage opérationnel / Voyant constamment allumé
 Chauffage non opérationnel / AUCUN voyant allumé